

尿葡萄糖定性检测试剂盒(改良班氏法)

产品简介:

班氏试剂又称本氏液、本尼迪克特试剂、本尼迪克试剂、本尼迪克试液或本尼迪特试剂, 是一种浅蓝色溶液。Leagene 尿葡萄糖定性检测试剂盒(改良班氏法)采用改良班氏试剂进行检测, 其原理是含有醛基的葡萄糖在高温和强碱条件下, 能将溶液中蓝色的 Cu^{2+} 还原为黄色至砖红色的氧化亚铜(Cu_2O)沉淀, 主要用于定性检测人、动物尿液中葡萄糖含量。该试剂盒仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	TC0455	Storage
	100T	
尿葡萄糖定性试剂	100ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

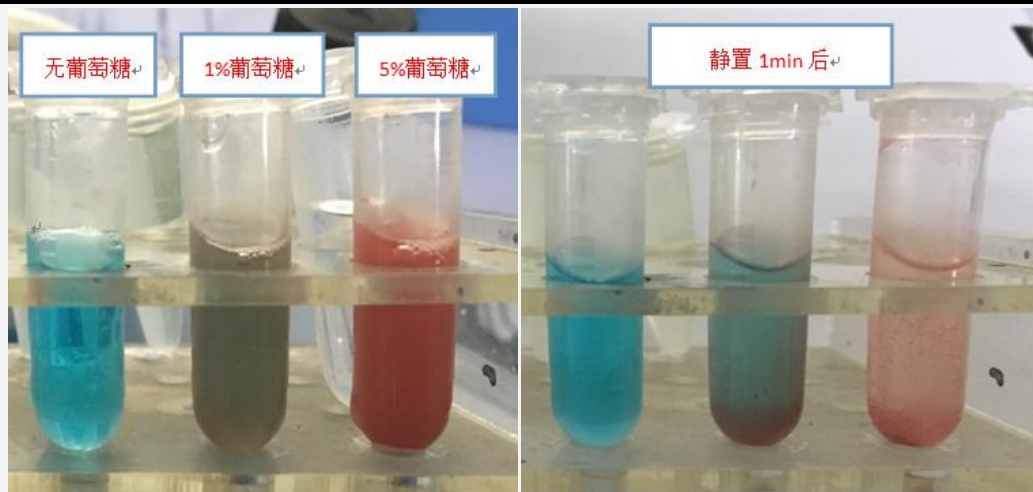
操作步骤略, 如需完整版请咨询客服。

注意事项:

- 1、在酒精灯上加热煮沸, 时间不得少于 1min。
- 2、应在煮沸后自然冷却, 不应用冷水使其变冷。
- 3、当含有大量尿酸盐时, 应把尿液置于冰箱中待盐类下沉后, 取上清做实验。
- 4、当含有大量铵盐时, 应加入过量的碱并煮沸几分钟再做实验。
- 5、链霉素、维生素 C、水合氯醛、葡萄糖醛酸化合物课程假阳性反应; 大黄、黄连等可呈假阳性反应。
- 6、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 7、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

附图:


相关产品:

产品编号	产品名称
CC0005	磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,无钙镁)
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
DZ2011	环保浸蜡脱蜡透明液
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0711	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 微板法)
TC1167	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)